


Стейк V вар. 3

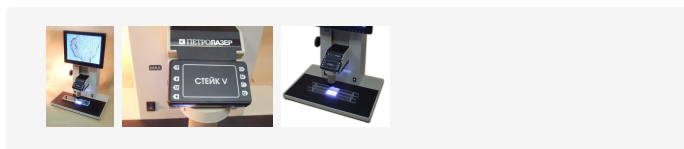

ЦЕНА

по запросу

Категории:

Оборудование для исследования на

трихинеллез

Трихинеллоскопы

Трихинеллоскопы для контроля качества мяса

Оборудование анализа мяса на трихинеллез

для мясоперерабатывающей промышленности

Оборудование для мясоперерабатывающей
промышленности

Оборудование для исследования на

трихинеллез для ветклиник

Оборудование для животноводства и

воспроизводства сельскохозяйственных

животных

Оборудование для ветеринарных клиник

Описание

Трихинеллоскоп «Стейк V вар. 3» — трихинеллоскоп последнего поколения с расширенными возможностями предназначен для контроля заражения трихинеллезом продуктов убоя домашних и диких животных в условиях лабораторий санитарно-

ветеринарной экспертизы, СЭС. Также применяется для контроля рыбы в рыбоводческих хозяйствах, на рыбоприемных пунктах и рыбоперерабатывающих предприятиях для диагностики паразитарных заболеваний рыб.

Трихинеллоскоп позволяет производить фото и видео съемку исследуемого материала для последующего анализа или архивирования.

Назначение

Прибор реализует компрессорный метод контроля, а также возможно исследование надосадочной жидкости при исследовании образцов мяса методом переваривания в искусственном желудочном соке. При этом аппарат может дополнительно к компрессориям комплектоваться прямоугольной кюветой, изготовленной в соответствии с Директивой ЕС 2075\2005.

Особенности

Используется цифровая камера высокого разрешения, и HD — LED монитор, позволяющие получить четкое, контрастное изображение. Плавное изменение коэффициента увеличения позволяет рассматривать на экране как всю ячейку целиком, так и подробности структуры микропрепарата при большем увеличении.

Характеристики

Минимальный коэффициент увеличения, не более	10
Максимальный коэффициент увеличения, не менее	200
Размер экрана (диагональ), мм	300
Разрешение монитора	1280 x 1024

Разрешение видеокамеры	1920 x 1080
Интерфейс передачи данных	HDMI
Максимальная просматриваемая высота прозрачного объекта, мм	18
Возможность записи изображения на CD карту	Да
Регулировка яркости освещения	Да
Электропитание	220В/50 Гц
Энергопотребление, не более, Вт	50
Габаритные размеры, мм	300x400x560
Масса, не более, кг	10

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7(923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

