

ПРЕДМЕТНЫЕ И ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА



- » Предметные/покровные стекла Menzel
- » Покровные стекла Thermo
- » Архивные системы для предметных стекол

В данной брошюре вашему вниманию предлагается широкий выбор предметных и покровных стекол производства немецкой фирмы Menzel.


Стандартизованные предметные стекла Menzel производятся в строгом соответствии с ISO Norm 8037/I, имеют толщину 1 мм и размеры 26x76мм или 25x75 мм. В производстве используется только экстра белое стекло.

Примерный химический состав стекла: диоксид кремния 72,2%; оксид натрия 14,3%; оксид калия 1,2%; оксид кальция 6,4%; оксид магния 4,3%; оксид алюминия 1,2%; оксид железа 0,03%; триоксид серы 0,3%.

Наши специалисты окажут Вам консультацию, и помогут подобрать стекла в соответствии с задачами Вашей лаборатории. Все стекла Menzel имеют абсолютно ровную и обезжиренную поверхность, обладают высоким качеством и полностью готовы к применению.

ПРЕДМЕТНЫЕ СТЕКЛА MENZEL С ПОКРЫТИЕМ

Предметные стекла Menzel с адгезивным покрытием предназначены для работы с замороженными, формалин-фиксированными и парафиновыми срезами, цитологическими мазками, культурами клеток и прочими материалами.

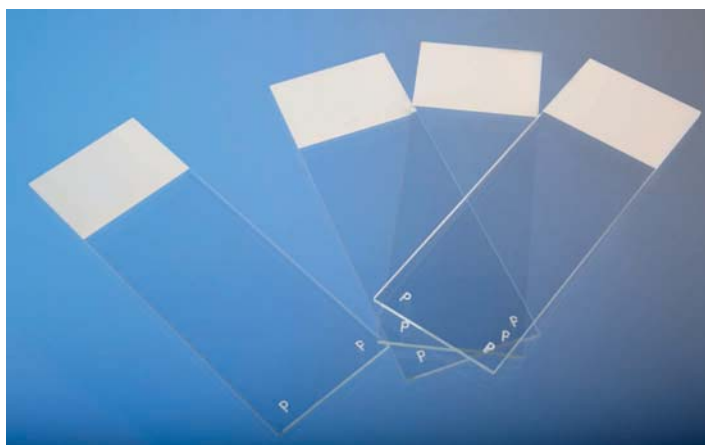

Polysine – обладают превосходной адгезией к клеткам и тканям. Идеально подходят для работы с:

- » препаратами, заключенными в парафин,
- » цитологическими мазками и препаратами, полученными в цитоцентрифуге,
- » тканями, фиксированными спиртом,
- » срезами растений и органами животных и человека, обработанными стандартными фиксаторами или фиксатором Буэна.

SuperFrost Plus/ Ultra Plus/ Plus Gold – разработаны специально для использования в патологоанатомических лабораториях:

- » исключают фоновую окраску при стандартной окраске гематоксилин-эозином,
- » имеют высокое качество адгезии клеток при центрифугировании и окраске по Папаниколау,
- » фиксированные парафиновые срезы и цитологические препараты лучше клеятся и нет необходимости использования специальных клеящих веществ или белкового слоя,
- » при окраске гематоксилин-эозином не образуется синий или красный фон,
- » при работе с иммунопероксидазой или ДНК in-situ не образуется коричневый фон.

Ultra Plus – обладают улучшенной адгезией к срезам, окрашенным с использованием микроволновых технологий.

Plus Gold – надежно закрепляют срезы замороженной молочной железы, мозга, кожи, лимфатических узлов и других обычно трудно связываемых срезов, а также используются для специфической иммуноцитохимической окраски и методах гибридизации ДНК.

Наименование	Каталожный номер	Кол-во в уп.	Размер, мм
Стекла предметные Polysine	J2800AMNZ	72 шт/уп	25x75x1
Стекла предметные Superfrost Plus	J1800AMNZ	72 шт/уп	25x75x1
Стекла предметные Superfrost Ultra Plus	J3800AMNZ	72 шт/уп	25x75x1
Стекла предметные SuperFrost Ultra Plus, с шлифованной кромкой 45°	J4800AMNZ	72 шт/уп	25x75x1
Стекла предметные Superfrost Plus Gold	K5800AMNZ72	72 шт/уп	25x75x1

ПОКРОВНЫЕ СТЕКЛА ДЛЯ АВТОМАТОВ ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД ПОКРОВНОЕ СТЕКЛО

Помимо покровных стекол для рутинных работ мы предлагаем покровные стекла для автоматов для заключения под покровное стекло.

Наименование	Размер, мм	Тип*	Каталожный номер	Кол-во в уп.
Стекла покровные для автоматов (Shandon)	24x40	1	BB024040S1	100 шт/уп
	24x50	1	BB024050S1	100 шт/уп
	24x60	1	BB024060S1	100 шт/уп
	24x40	1,5	BB024040SC	100 шт/уп
	24x50	1,5	BB024050SC	100 шт/уп
	24x60	1,5	BB024060SC	100 шт/уп
Стекла покровные для CoverTech CTM	24x40	1	BB024040M1	100 шт/уп
	24x50	1	BB024050M1	100 шт/уп
	24x60	1	BB024060M1	100 шт/уп

* Тип 1 имеют толщину 0,13–0,16 мм

Тип 1,5 имеют толщину 0,16–0,19 мм

ВНИМАНИЕ:

применение покровных стекол, не предназначенных для автоматов, может привести к выходу из строя оборудования.

Покровные стекла для автомата ClearVue



В автомате для заключения под покровное **стекло ClearVue** фирмы **Thermo Shandon** применяются покровные стекла, упакованные в специальные кассеты. Это облегчает работу лаборанта – достаточно вытащить пустую кассету и вставить новую со стеклами.

Наименование	Размер, мм	Тип*	Каталожный номер	Кол-во в уп.
Стекла покровные в кассетах	24x40	1	A79210165	1100 шт/уп
	24x50	1	A79210166	1100 шт/уп
	24x40	1,5	A79210050	1000 шт/уп
	24x50	1,5	A79210051	1000 шт/уп
	24x55	1,5	A79210052	1000 шт/уп

* Тип 1 имеют толщину 0,13–0,17 мм

Тип 1,5 имеют толщину 0,16–0,19 мм

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, 7/3
тел./факс:
(495) 745-0508
sales@dia-m.ru

Новосибирск
пр. Акад.
Лаврентьева, 6/1
тел./факс:
(383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Казань
ул. Парижской
Коммуны, д. 6
тел./факс:
(843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

С.-Петербург
ул. Профессора
Попова, 23
тел./факс:
(812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
пер. Семашко, 114
тел./факс:
(863) 250-0006
rnd@dia-m.ru

Пермь
Представитель
в УФО
тел./факс:
(342) 202-2239
perm@dia-m.ru

Воронеж
Представитель
тел./факс:
(473) 232-4412
voronezh@dia-m.ru

Армения
Представитель
тел.
094-01-01-73
armenia@dia-m.ru

www.dia-m.ru