


Уверенно готовьте растворы Удобство и экономичная цена



Простые методы дозирования

Прибор автоматически выбирает стандарты. Просто введите вес образца и установите целевую концентрацию. Минимизировать риск ошибок регистрации данных позволяет функция автоматической передачи данных при подключении прибора к весам MS, ML или ME компании МЕТТЛЕР ТОЛЕДО.

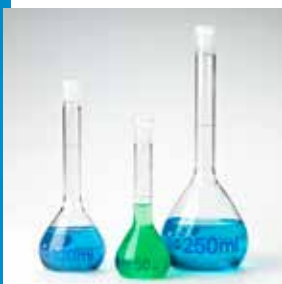

Четкие инструкции

Разработанный специально для упрощения работы, Easy Dose позволяет запускать повседневные операции одним касанием. Интуитивно понятный интерфейс на русском языке, а также поддержка 14 других языков. Освоение и эксплуатация нового аналитического прибора еще никогда не были столь простыми.



Простота в эксплуатации

Управляйте ходом анализа с помощью сенсорного дисплея или USB-устройства регулировки скорости титрования. Которое синхронизировано с 4,3-дюймовым сенсорным дисплеем, что обеспечивает точное управление и удобство работы.



Приложение iTitrate существенно упрощает программирование

Благодаря технологии iTitrate Intelligence программирование метода выполняется просто с помощью EasySetup. Необходимо задать лишь несколько параметров, и прибор выполнит все остальное, включая правильные расчеты в нужных единицах.



Easy Dose

Выполнять повседневные задачи приготовления стандартов и дозирования проще и быстрее. Объем жидкости, скорость и время дозирования можно настроить в соответствии с задачей. Благодаря простому интерфейсу работа становится удобнее и эффективнее. Технология iTitrate Intelligence помогает в программировании методов для единообразной подготовки образцов независимо от оператора и с минимальными усилиями. Автоматически экспортируйте результаты на USB-накопитель или сразу распечатайте их на USB-принтере.

Easy Dose

Стандартная комплектация

Наименование	Номер для заказа
Бюретка EasyPlus, объем 50 мл	30043902
Комплект трубок EasyPlus для прибора	30065464
Осушительная трубка EasyPlus	30044701
Клапан бюретки	30042860
Крышка бутылки	30060023
Комплект крышек для бюретки	30057633

Принадлежности

Наименование	Номер для заказа
Бюретка EasyPlus 10 мл	30043900
Бюретка EasyPlus, объем 20 мл	30043901
Магнитная мешалка EasyStir GT	30065467
Стенд титрования EasyPlus GT	30041102
Комплект пробок для стенда титрования GT	30057635
Адаптер для бутылки, Китай	30060026
Адаптер для бутылки, Индия	30060024
Адаптер для бутылки, Мерск	23774
Адаптер для бутылки, Fischer	23787
Сифонные наконечники (5 шт.)	23240
Стеклолабораторные стаканы (80 мл), 20 шт.	101446
Пластмассовые лабораторные стаканы (80 мл), 120 шт.	51109388
Принтер USB-P25	11124301
Контроллер EasyWheel	30459699
UMix	30040000
UPlace	30019823
Держатель для пробирок, полипропилен, 3 шт.	30459710

Технические характеристики

Блок питания	Входное напряжение	24 В постоянного тока / 1,25 А
	Входное напряжение сети	100 – 240 В ±10 %
	Входная частота	50/60 Гц
Окружающая среда	Температура окружающей среды	+5...+40 °С
	Атмосферная влажность	Максимум 80 % при 31 °С
Габаритные размеры	Ширина x глубина x высота / вес	170 x 220 x 350 мм / 1,9 кг
Управление и дисплей	Сенсорный дисплей	4,3 дюйма, 480 x 272 точек RGB
Передача данных	USB-A	USB полная / низкая скорость
	USB-B	USB полная / низкая скорость

000 «Диаэм»

Москва
ул. Магаданская, д. 7, к. 3 ■ тел./факс: (495) 745-0508 ■ sales@dia-m.ru

www.dia-m.ru

С.-Петербург
+7 (812) 372-6040
spb@dia-m.ru

Новосибирск
+7 (383) 328-0048
nsk@dia-m.ru

Воронеж
+7 (473) 232-4412
vrn@dia-m.ru

Йошкар-Ола
+7 (927) 880-3676
nba@dia-m.ru

Красноярск
+7 (923) 303-0152
krsk@dia-m.ru

Казань
+7 (843) 210-2080
kazan@dia-m.ru

Ростов-на-Дону
+7 (863) 303-5500
rnd@dia-m.ru

Екатеринбург
+7 (912) 658-7606
ekb@dia-m.ru

Кемерово
+7 (923) 158-6753
kemerovo@dia-m.ru

Армения
+7 (094) 01-0173
armenia@dia-m.ru

